

**WIELAND**  
D E N T A L



DIMENSIONES ILIMITADAS ...

C-Box   
dimension

## Dimensiones ilimitadas ...

Superar con maestría los desafíos estéticos y técnicos planteados: esa es nuestra pasión. WIELAND adapta sus exitosas cerámicas de recubrimiento a los requisitos técnicos y temporales. Disfrutan de compatibilidad digital, se almacenan en la C-Box permitiendo a los usuarios todas las libertades. Las cerámicas tipo X conquistan nuevas dimensiones.

El impulso innovador de Reflex dimension es la novedosa cerámica monocapa Reflex dimension One, que permite realizar el recubrimiento de manera rápida presentando así un alto potencial económico. Los modificadores de los que hasta entonces sólo se disponía para recubrir cerámicas de óxidos también se hacen ahora extensibles a la cerámica Reflex. De este modo se logra una adaptación aún mejor entre los trabajos de cerámica pura y cerámica metálica.

El núcleo y almacén creativo de las masas cerámicas recibe el nombre de Creative Box. Se trata de un sistema cerámico compacto, variable y creativo con numerosos grados de libertad. Todo es posible: comenzando por la cerámica monocapa y pasando por la clásica técnica estándar de tres capas para llegar a la estratificación individual incluidos los colores Master\* 3D y de blanqueamiento.

Este sistema cerámico es compacto, se limita a lo verdaderamente necesario e incluso puede equiparse de forma individual para una „nueva dimensión“.

*Reflex dimension: ¡creatividad al poder!*

## Una Capa

- Técnica sencilla y convincente con una sola capa
- Economía de pintado

## Tres capas

- Estratificación mediante opaquer, dentina e incisal
- Requisitos de exigencia superiores a la media

## Professional

- Apto para todas las indicaciones
- Requisitos estéticos de máxima exigencia por parte de los pacientes


Aumento de la estética

# Propiedades del material

Con la introducción de la primera generación de la cerámica metálica REFLEX se dio un importante paso para perfeccionar cerámicas altamente fundentes con un amplio ámbito de aplicación. La acreditada estructura de nanoleucita ofrece un alto nivel de seguridad para el uso clínico. Esta característica se ha mantenido de manera consecuente en la nueva Reflex dimension. La exactitud en el manejo, los ciclos de frío a frío y la aplicación de REFLEX NP safe sobre aleaciones NEM aumentan aún más la seguridad.

Estructura de nanoleucita: microestructura sin grietas en la que se hallan repartidos de forma homogénea minúsculos cristales de leucita. Muchos cristales poseen un amplio rango nanométrico. El resultado:

- Superficie sumamente lisa, homogénea y resistente a la placa dental
- No daña antagonistas ni encías
- Se puede pulir fácilmente a brillo intenso en la boca

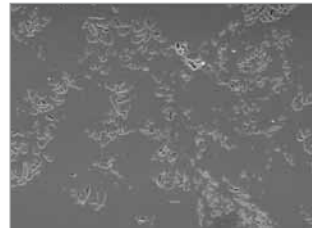

## Primer paso fácil

Con el C-Box se presenta un sistema de diseño moderno, compacto y ergonómico. De esta manera, el tiempo requerido y el consumo de material se pueden adaptar mejor a los requisitos de la cerámica monocapa desde una estratificación estándar de menor masa hasta una restauración completa de primera calidad para las exigencias más altas. Los sistemas cerámicos modernos son compactos, se limitan a lo verdaderamente necesario e incluso puede equiparse de forma individual para una „nueva dimensión“. De esta forma se puede componer de manera automática el contenido de la C-Box.

Freestyle es solo una posibilidad. Fácil implementación de diferentes módulos prefabricados en función de los requisitos de cada laboratorio. Las dimensiones para la creatividad y rentabilidad son infinitas. Todos los módulos y masas se adaptan al núcleo de este sistema. La C-Box.



# Primer paso en el mundo de las dimensiones



*Técnica monocapa*



*Técnica de tres capas*



*Técnica de capas profesional*

## Módulo Dimension One: la introducción en la técnica monocapa

Con tan sólo dos masas de dentina translúcidas, los opaquers correspondientes y cuatro colores Bodystain se pueden reproducir de forma sumamente eficaz mediante pintado los 16 colores de dientes de la guía A-D Shade Guide.

## Módulo Basic I: la introducción en la técnica de tres capas

Para clientes que prefieran optar por una técnica clásica de tres capas como alternativa a la estratificación profesional. Este módulo comprende los 16 colores de dientes así como los 4 colores de blanqueamiento.

## Módulo Basic II: la introducción en la técnica de capas profesional

El módulo Basic II consiste en una gama clásica de 8 colores, ideal para el clásico procedimiento multicapa. Así pues se incluyen 8 masas opaquer, así como la dentina y masas Chromatix correspondientes. Adicionalmente esta gama se ve completada con diversos tipos de modificadores y colores.

Naturalmente podrá completar estas posibilidades de introducción en el mundo de las nuevas dimensiones: los módulos **Add On I y Add On II Module** son el suplemento ideal para el módulo básico y permiten ampliarlo hasta obtener la gama completa. Si ha quedado fascinado con este singular concepto, podrá elegir una **gama completa** o componerla usted mismo: así pues completamente Freestyle. En estos casos la excepcional C-Box será gratuita para usted.

# Módulos individuales



## Módulo de blanqueamiento

El módulo de blanqueamiento incluye todas las masas para reproducir los cuatro colores de blanqueamiento conforme a la guía A-D Shade Guide.

## Módulo 3D

Sirve para crear los 26 colores Master 3D\*.

## Módulo Stain

Este módulo abarca 16 colores y cuatro Bodystains.

## Módulo Chromatix

Este set incluye todas las masas Chromatix auxiliares y complementarias de los 16 colores de dientes.

## Módulo Shoulder

Con 18 masas de hombro, este módulo cubre todos los ámbitos de trabajo relacionados con la fabricación de hombros.

## Módulo Advanced

Este módulo avanzado consta de las restantes masas de reconstrucción. La técnica de capas profesional no conoce límites.

\*Marca registrada de la empresa Vita, Bad Säckingen, Alemania.

# Seguridad, ergonomía y rentabilidad

Si bien los nuevos productos cerámicos destacaban hasta el momento con su calidad óptica y estética, en los últimos años otros aspectos han ido cobrando mayor importancia: la rentabilidad, los costes y, con ello, la ergonomía de un producto.

## Seguridad

- **Coefficientes de adherencia superiores** a la media para todas las aleaciones convencionales dentro del ámbito de las indicaciones
- En general se prescinde de una larga fase de enfriamiento
- Elevada resistencia a la rotura
- **Garantía Longlife de 10 años**

## Rentabilidad

- **Cerámica monocapa** como solución especialmente rentable
- La tecnología de capa más sencilla de nivel **estándar a superior**
- Reproducción cromática segura y sencilla con una económica técnica de tres capas
- Resistente en su aplicación
- Combinación individual de la gama gracias a **la estructura modular**
- Magníficas propiedades de manipulación, excelente comportamiento de cocción

## Estética

- Auténtica identidad cromática para todas las cerámicas tipo X de WIELAND
- **Masas de nácar iridiscente** para fascinantes efectos de esmalte
- Dentina y Chromatix para colores base brillantes e intensos
- También se pueden reproducir los **colores de blanqueamiento**
- Mejora de esmaltes opalescentes con mayor translucidez y brillo
- **ZENOSTAR Magic Glaze** esmalte pulverizado para superficies homogéneas
- Fluorescencia y opalescencia de efecto natural
- **Colores Master 3D\*** ahora reproducibles





**WIELAND**  
D E N T A L

Reflex   
dimension

[www.wieland-dental.de](http://www.wieland-dental.de)

WIELAND Dental + Technik GmbH & Co. KG  
Schwenninger Straße 13, 75179 Pforzheim, Germany  
Fon +49 72 31/37 05-0, Fax +49 72 31/35 79 59

530096es.00.09/10  
\*Marca registrada de la empresa Vita, Bad Säckingen, Alemania.